

СИСТЕМА ЛОКАЛЬНОЙ КОМПРЕССИОННОЙ КРИОТЕРАПИИ

БЫСТРОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Система состоит из портативного блока управления и различных видов манжет, оказывающих пульсирующее и одновременно охлаждающее действие.

Данная система рекомендована для использования при реабилитации после острых травм опорно-двигательного аппарата и физических нагрузок, помогает пациенту восстанавливаться быстрее и эффективнее.



- АКТИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
- ПУЛЬСИРУЮЩАЯ КОМПРЕССИЯ

КАК РАБОТАЕТ CRYOPUSH?

Перед включением и выбором необходимой программы, блок управления заполняется холодной водой и льдом, а на область травмы надевается удобная, принимающая контуры тела манжета (бандаж). Вода начинает быстро циркулировать по манжете активно охлаждая травмированную область, а пульсирующая компрессия имитирует естественные мышечные сокращения.


Процесс одновременного пульсирующего сжатия и охлаждения манжеты стимулирует насыщенный кислородом кровоток, снимает воспаление и уменьшает отёк, что оказывает большую эффективность процедуры, чем просто воздействие холодом.



КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА В ТЕРАПИИ

ЛЕЧЕНИЕ СИМПТОМОВ И УСКОРЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

После перенесённой пациентом острой костно-мышечной травмы или нахождения на реабилитации после травматологической операции, CRYOPUSH® даёт ему возможность ускорить процесс восстановления и быстрого возвращения к нормальной деятельности.

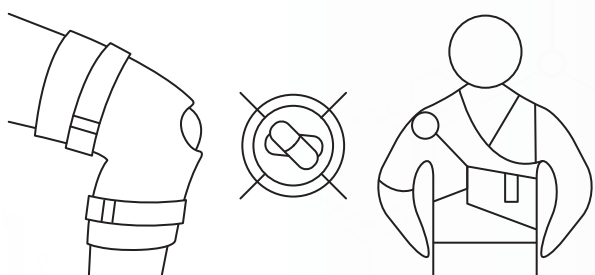

УМЕНЬШЕНИЕ БОЛИ И ОТЕЧНОСТИ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВ

CRYOPUSH® помогает оптимизировать физиотерапию и ускорить заживление травмированной области. Система даёт большие преимущества в терапии, улучшая протоколы ОХСП (отдых, холод, сжатие, подъем), стимулируя естественное заживление тканей и улучшая физиотерапевтические показатели.



ПОКАЗАНИЯ

Система криотерапии с пульсирующей компрессией используется, в основном, для ухода за острыми и послеоперационными травмами, для уменьшения отеков и болей.

Эту систему можно использовать в больницах, амбулаторных клиниках, спортивных центрах и дома.

Перед использованием CRYOPUSH® необходимо проконсультироваться с врачом физиотерапевтом и подобрать оптимальный режим работы в соответствии с планом лечения.

АКТИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

CRYOPUSH® снижает метаболическую активность и потребность клеток в кислороде, предотвращая вторичное повреждение тканей.

Активное охлаждение снимает мышечный дискомфорт, обезболивает мышцу или сустав в течение длительного периода времени.

ПУЛЬСИРУЮЩАЯ КОМПРЕССИЯ

Пульсирующее сжатие имитирует естественные мышечные сокращения, снимает отёчность в травмированной зоне, стимулирует приток насыщенной кислородом крови к травмированному участку. Помогает уменьшить и предотвратить образование отеков.

ПРЕИМУЩЕСТВА CRYOPUSH®



ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОСТО

Наполните водой и льдом, подключите и используйте — вот насколько проста система в работе.

ЛЕГКОСТЬ

Это портативный и прочный прибор, который легко взять с собой.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Система использует упрощенное и интуитивно понятное программное обеспечение с 9 предустановленными программами, интервалами времени (10, 20, 40 мин.) и уровнями компрессии (низкий, средний, высокий).



ЧТО ВХОДИТ В ПОЛНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ

5 ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ КОМПРЕССИОННОЙ ТЕРАПИИ

- Блок управления
- Сетевой адаптер
- Сумка для переноски и хранения
- Соединительный шланг
- Манжеты (бандаж) для каждой части тела (на выбор): на колено 360° / на плечо / на голеностоп / на голень / на бедро / на спину

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность переменного тока: 100-240В, 50/60 Гц

Выход постоянного тока: 12В/2А

Уровень давления: 60мм рт. ст. — 120мм рт. ст.*

Уровень температуры: 0° С-25°С**

Уровень шума: меньше 50 децибел

Вес: 1.78кг в пустом состоянии

Объем отсека для воды и льда: Максимум 3,6 л.

ВОЗМОЖНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплект PRO:

- Блок управления
- Сетевой адаптер
- Сумка для переноски и хранения
- Соединительный шланг
- Манжета на голеностоп
- Манжета на колено 360°

Комплект ELIT:

- Блок управления
- Сетевой адаптер
- Сумка для переноски и хранения
- Соединительный шланг
- Манжета на голеностоп
- Манжета на спину
- Манжета на колено 360°
- Манжета на голень
- Манжета на плечо



•КОЛЕНО



•СПИНА



•ПЛЕЧО



•ЛОДЫЖКА

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ И КОМПРЕССИИ + АКСЕССУАРЫ

Система криотерапии с пульсирующей компрессией используется, в основном, для ухода за острыми и послеоперационными травмами, для уменьшения отеков и болей.

Система включает анатомические манжеты (бандажи) изготовленные для каждой части тела.

- Криотерапия
- Компрессия
- Анатомический дизайн
- Простой интерфейс
- Портативность

ПРЕИМУЩЕСТВА CRYOPUSH

Система охлаждения с пульсирующей компрессией CRYOPUSH® способствует быстрому выздоровлению пациентов и спортсменов. Методика локальной компрессионной криотерапии стимулирует регенеративные процессы, лимфоток, циркуляцию крови, снимает отеки, улучшает диапазон движения и ускоряет естественные механизмы восстановления организма.

ДЛЯ ЗАКАЗА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

ООО «Современные Спортивные Технологии»

info@sportmedcare.ru
+7 (495) 981-23-49
www.sportmedcare.ru



КРИОТЕРАПИЯ

Холодная вода, поступая в манжету, воздействует холодом на поврежденные мягкие ткани, замедляет клеточный метаболизм, предотвращает вторичное повреждение тканей и способствует быстрому естественному восстановлению.

Активное охлаждение снимает мышечный дискомфорт, обезболивает мышцы или сустав в течение длительного периода времени.

КОМПРЕССИЯ

Пульсирующая компрессия имитирует естественные сокращения мышц, стимулирует кровоток в поврежденных тканях и уменьшает отек, насыщая место травмы кислородом.

ПРОСТОЙ ИНТЕРФЕЙС

Простое управление системой. В наличии 9 предустановленных программ, с настройками времени и уровня компрессии.

ПОРТАТИВНОСТЬ

Систему легко транспортировать.

ТЕМПЕРАТУРА *0° C-25° C

ДАВЛЕНИЕ **60MM RT. CT. — 120MM RT. CT.

ОБЪЕМ ОТСЕКА ДЛЯ ВОДЫ И ЛЬДА МАКСИМУМ 3,6 Л